その他取扱いキャスター

ロタキャスター









ノーパンクタイヤ



東京営業

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1 丁目 6 番 1 号 TEL. 03-3253-5331 FAX. 03-3251-3151

新東京工場

〒300-0604 茨城県稲敷市釜井 1727 TEL. 0299-79-3200 FAX. 0299-79-3205

大阪営業

〒530-0047 大阪市北区西天満 3 丁目 6 番 35 号 TEL. 06-6316-0121 FAX. 06-6316-0113

E-mail: info@kanatsu.com URL: https://www.kanatsu.com

> 2022年総合カタログ 2022年9月30日 初版第1刷発行 ©2022.9.KANATSU MC-10-OP





Kanatsu Co. Ltd.

Medical Caster Sales

Ultrasonograph

Medical Equipment

MRI

3003

Stretcher

Materials Handling & Products

KANATSU

Medical Bed





■ブレーキ機構

●トータルロック (T/L)





旋回部と車輪の回転を同時にロック OFF ペダルカラー: グレー


●ディレクショナルロック (D/L)



旋回部のみロックし、直進方向への移動が可能 OFFペダルカラー:グリーン



●セントラルロック

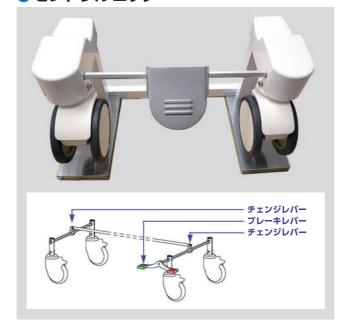

●使用例

	キャスター種別	個	ブレーキ操作効果
	T/Lキャスター	3個	T/LL 0110.0
	T/L&D/L キャスター	1個	T/L:トータルロック D/L:直進方向規制

一度の操作で4輪すべてのキャスターブレーキを操作可能!

■医療用キャスター採用実績









その他:介護入浴装置/MRI/精密機器/運搬機器など

※お客様のご要望に沿ったカスタマイズ製品も展開しております。 「理想の医療介護機器」の実現に向け、まずは弊社へご相談ください。